



SoToxa™ Mobile Test System

SCHNELLES DROGENSCREENING
IN IHREN HÄNDEN



SoToxa™ Mobile Test System

TESTS VOR ORT

Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz kann zu einer geringen Produktivität, Unfällen und Verletzungen führen. Die wirksame Feststellung eines etwaigen Drogenkonsums muss daher schnell und einfach vonstattengehen.

88 Millionen

Psychoaktive Drogen werden in ganz Europa eingenommen. Studien zeigen, dass 88 Millionen Erwachsene, etwas mehr als 25 % der 15- bis 64-jährigen in der EU, in ihrem Leben unerlaubte Drogen ausprobiert haben.¹

HÖHERE SICHERHEIT

Unsere Arbeitsumgebungen sicher zu halten, ist eine Top-Priorität. Die SoToxa™-Handheld-Technologie mit unmittelbaren aussagekräftigen Ergebnissen kann die Sicherheit verbessern und Angestellten sowie Arbeitgebern dabei helfen, ihr bestes Leben zu leben.



TRAGBAR, HANDLICH UND LEICHT BEDIENBAR

Das SoToxa™ Mobile Test System ist ein handliches Analysegerät, das eine optimale Kombination aus Geschwindigkeit, Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Genauigkeit vereint. Das Analysegerät wurde dafür entwickelt, die hohen Leistungsanforderungen von Arbeitsplatzzumgebungen zu erfüllen. Dadurch erhalten Benutzer die Möglichkeit, zum unmittelbaren Handeln, dank sofortiger Testergebnisse.

TESTS VOR ORT

Das SoToxa™ Mobile Test System ist das ideale Instrument für Drogentests in solchen oftmals schwierigen Umgebungen. Proben können überall genommen werden, ohne dass geschlechtsspezifische Einrichtungen erforderlich wären. Mit einer einzigen Speichelprobe können bis zu 6 Drogenklassen innerhalb von 5 Minuten erkannt werden. Das etwas weniger als 700 g schwere und komfortabel in die Hand passende Analysegerät kann überallhin mitgenommen werden.

Das System ist auf die Nutzung in verschiedensten Umgebungen ausgelegt. Das 3,2-Zoll-Vollfarb-Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine exzellente Lesbarkeit bei Tag und bei Nacht.




TESTDURCHFÜHRUNG


1 Testkartusche in das Analysegerät einführen.



2 Speichelprobe nehmen.

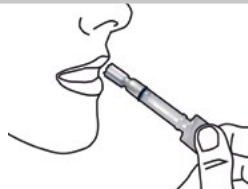

3 Speichelsammler in die Testkartusche einführen.

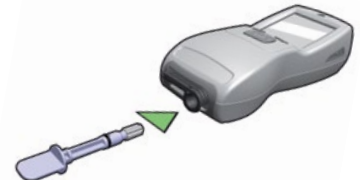

WICHTIGE MERKMALE



PORTABILITÄT

- Handlich, leicht und kompakt.
- Transportkoffer für Analysegerät, Drucker und alle Bestandteile; klein genug, um in den Stauraum eines Motorrads zu passen.
- Optionales Kit zum Aufladen im Auto verfügbar.



BEDIENFREUNDLICH

- Testverfahren in 3 Schritten.
- Jede Testkartusche hat einen Quick Response (QR)-Code, um Bedienungsfehler zu vermeiden.
- Die Einfachheit des Geräts minimiert die Anforderungen an Benutzerschulungen und ermöglicht somit einen schnellen Einsatz.
- Das Analysegerät interpretiert und ermittelt das Testergebnis, die Subjektivität zu visuell interpretierten Ergebnissen entfällt.



SCHNELLE ERGEBNISSE

- Der Probensammler ist auf aktive Abstriche ausgelegt, um die Probenahme zu beschleunigen.
- Probenentnahme in maximal 60 Sekunden².
- Die Anzeige für ein angemessenes Volumen wird blau, wenn genug Probematerial genommen wurde. Keine zeitlich befristete Probenentnahme.
- Ergebnisse in 5 Minuten.



QUALITÄTSKONTROLLE

- Nach dem Einschalten des Analysegeräts werden automatisch Selbstkontrollen durchgeführt.
- Positive und negative Kartuschen zur Qualitätskontrolle (PQC und NQC) prüfen, ob das Analysegerät die Ergebnisse richtig interpretiert.
- Qualitätskontrollprüfungen können täglich, wöchentlich oder zweiwöchentlich vor jedem Test durchgeführt werden.
- Die integrierten Sensoren überwachen den Testfortschritt.
- Integrierte Heizelemente stellen sicher, dass die Tests bei optimaler Temperatur durchgeführt werden, um Variabilitäten zu reduzieren.



DATENVERWALTUNG

- Interne Speicherkapazität für mehr als 10.000 Tests
- Drucker liegt bei.
- Heruntergeladene Daten für Analysen und Berichte können über die Desktop-PC-Software verwaltet werden.

2. Basierend auf Daten von einer Population ohne Drogenkonsum.

TESTOPTIONEN

DROGENKLASSE	ABKÜRZUNG	ZIELDROGE	CUTOFF (ng/ml)
Amphetamin	AMP	(S) Amphetamin	50
Benzodiazepine	BZO	Temazepam	20
Cannabis (THC)	THC	Δ^9 THC	25
Kokainmetabolit	COC	Benzoyllecgonin	30
Methamphetamin	MAMP	(S) Methamphetamin	50
Opiate	OPI	Morphin	40



**AUSSAGEKRÄFTIGE TESTERGEBNISSE
FÜR 6 DROGENKLASSEN IN 5 MINUTEN.**

REFERENZEN

1. European Transport Safety Council (ETSC), Preventing Drug Driving in Europe: Policy Measures for National and EU Action, March 2017

**INFORMIEREN SIE SICH NOCH HEUTE AUF
[ABBOTT.COM/TOXICOLOGY](https://www.abbott.com/toxicology)**

© 2020 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Alle genannten Marken sind Marken der Abbott-Unternehmensgruppe oder ihrer jeweiligen Eigentümer.
Alle Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Die auf diesen Fotos dargestellten Personen sind Modelle. MKT52067 REV1 03/20

